

PLUS

C-17 C-22 C-28

ТРАДИЦИИ БУДУЩЕГО

Технические данные	C-17 PLUS	C-22 PLUS	C-28 PLUS
Напряжение питания	220/240 В 50 Гц 220/230 В 60 Гц		
Номинальная мощность	2300 Вт		
Габаритные размеры Ш x В x Г	480 x 500 x 600 мм		
Размеры камеры Диам. x глубина	250 x 350 мм	250 x 450 мм	280 x 450 мм
Общий вес	51 кг	52 кг	53 кг
Ёмкость резервуара	4,5 литра		
Автономная работа (при макс. уровне воды)	От 7 до 11 циклов	От 6 до 10 циклов	От 5 до 9 циклов

ЦИКЛ	Тип цикла	Время стерилизации (мин.)	C-17 PLUS	C-22 PLUS	C-28 PLUS	Сушка *
Время цикла, включая время стерилизации, за вычетом времени сушки (мин.)						
134 °C UNIVERSAL	B	4	27	29	37	13-17
121 °C UNIVERSAL	B	20	43	46	50	13-17
134°C VELOCE	S	4	20	23	26	1
134 °C ОБЁРНУТЫЕ ТВЁРДЫЕ ПРИБОРЫ	S	4	18	22	26	13-17
134 °C PRION	B	18	41	43	51	13-17
XXX °C CUSTOM	S	Пользователь может настроить параметры цикла при температуре 134 °C / 121 °C, времени обработки от 4' [134 °C] или 20' [121 °C] с регулируемой сушкой				
ВАКУУМНЫЙ ТЕСТ		ТЕСТ	18	18	19	
ТЕСТ HELIX / ТЕСТ БОУИ- ДИКА		ТЕСТ	20	24	28	
ВАКУУМ +ТЕСТ HELIX / ТЕСТ БОУИ-ДИКА (выполняются последовательно)		ТЕСТ	42	46	51	

* Сушка зависит от модели машины и объёма
Примечание: время указано без учёта макс. времени предварительного нагрева (10 мин.).
Примечание: время может меняться в зависимости от нагрузки и источника питания.
Примечание: Время для модели 120 В может увеличиваться макс. до 20 %.



BU Medical Equipment
Sede Legale Ed Amministrativa
Headquarters
CEFLA s.c. - Via Selice Provinciale, 23/a
40026 Imola (BO) - Italy
Tel. +39 0542 653111
Fax +39 0542 653344

Stabilimento
Plant
CEFLA s.c. - Via Bicocca, 14/C
40026 Imola (BO) - Italy
Tel. +39 0542 653441
Fax +39 0542 653601


CASTELLINI.COM



CASTELLINI.COM



ВСТРОЕННАЯ ОЧИСТКА ВОДЫ

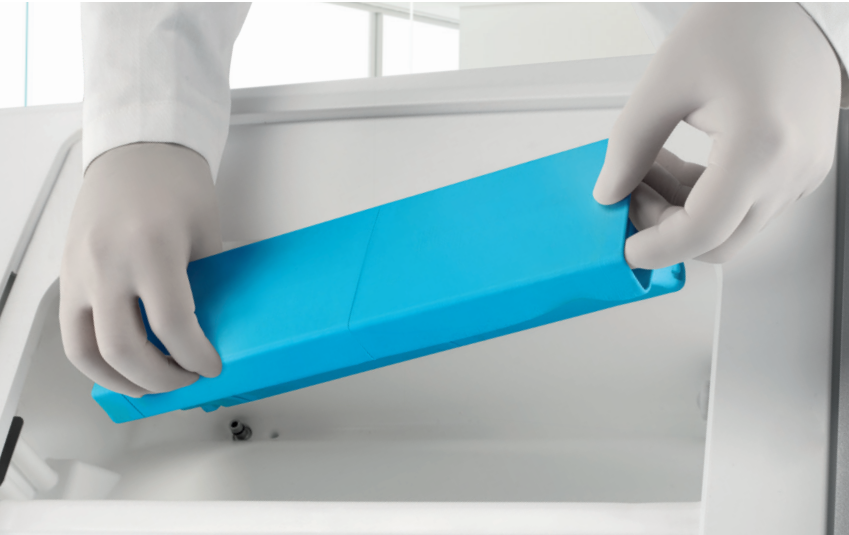

ПРИНЦИП РАБОТЫ

В отличие от традиционных автоклавов, C Plus не требует внешних устройств для очистки воды. На основном резервуаре машины имеется фильтр деминерализации, позволяющий использовать обычную водопроводную воду. Это оптимизирует пространство, технологические процессы и обеспечивает значительную экономию. Система фильтрации C Plus гарантирует непревзойдённую простоту эксплуатации.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ЭКОНОМИЯ

Никогда прежде автоклав не обеспечивал столь высокой производительности и низких затрат на эксплуатацию. Поскольку деминерализацию воды выполняет фильтр C Plus, вам не нужно искать очищенную воду — нужно лишь наполнить резервуар машины водопроводной водой. При минимальных усилиях износ внутренних компонентов машины из-за плохого качества воды останется в прошлом.



ИНТУИТИВНО ПОНЯТНО И УДОБНО

C Plus — это точный и незаменимый рабочий инструмент, который обеспечивает отличную производительность, в том числе благодаря цветному сенсорному ЖК-экрану и удобному интерфейсу. Каждый контрольный параметр обозначен иконкой, что позволяет с лёгкостью определить текущее состояние машины.

ПУСК С ЗАДЕРЖКОЙ

Опция пуска с задержкой позволяет отложить время запуска циклов автоклава и оптимизировать его эксплуатацию.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СУШКА

С помощью этой функции можно установить индивидуальное время сушки при особо сложной нагрузке.

НАСТРАИВАЕМЫЙ ЦИКЛ

Пользователь может задать параметры цикла для конкретных задач (с гарантией безопасности), выбрав из широкого диапазона значений, соответствующих стандартам.

ИДЕНТИФИКАТОР ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Функция позволяет уполномоченным сотрудникам получить расширенный доступ к управлению. Введя защитный PIN-код, можно отслеживать историю эксплуатации автоклава и осуществлять технологический контроль.

НАПОМИНАНИЕ О ТЕСТАХ

В случае выбора этой функции на дисплее, автоклав сообщит пользователю, когда необходимо провести вакуумный тест, Хеликс-тест или тест Боуи-Дика. Напоминание поможет вам не забыть об этих важных операциях.

РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЦИФРОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

ВСТРОЕННЫЙ WI-FI ДЛЯ УДАЛЁННОЙ ПОДДЕРЖКИ И ОБЛАЧНОЕ ХРАНИЛИЩЕ

По окончании каждого цикла стерилизации в памяти машины сохраняется отчёт. В любое время его можно скачать в формате PDF, используя USB-порт, или автоматически сохранить в облаке с помощью Wi-Fi и системы Di.V.A.



DI.V.A.

Di.V.A. («Digital Virtual Assistant») — цифровой виртуальный помощник. Это первая облачная система контроля устройств для стерилизации. Все сохранённые данные доступны пользователям на специальной веб-странице. Di.V.A. обеспечивает следующие возможности:

- Доступ к видеоурокам
- Отображение выполненных циклов
- Проверка производительности и состояния машины
- Считывание статистики использования машины
- Контроль частоты стерилизационных тестов



УДАЛЁННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА С EASY CHECK

Все стерилизаторы линейки C Plus оснащены встроенным модулем Wi-Fi и портом Ethernet. Подключение к интернету с помощью сервиса Easy Check позволяет осуществлять диагностику и удалённую техническую поддержку в режиме реального времени. Это минимизирует время простоя оборудования и обеспечивает своевременное сервисное обслуживание.



ПРИНТЕР

Линейка C PLUS может быть дополнена внешним принтером, поставляемым в качестве опции. С его помощью можно распечатать отчёты или этикетки со штрих-кодом.



ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ

MyTrace — это программное обеспечение для оперативного контроля. С помощью штрих-кода программа позволяет связать каждый набор стерилизованных инструментов с конкретным пациентом, что помогает обеспечить стоматологам правовую защиту.



USB

Отчёты по циклам стерилизации автоматически сохраняются в памяти автоклава, после чего их можно выгрузить через USB-порт. PDF-файлы можно просматривать на любом устройстве.