

#whdentalwerk



video.wh.com

Теперь у вашего  
торгового агента или  
на сайте **wh.com**



«Аппарат

ONE



придает ускорение  
МОЕЙ работе.»



assistina<sup>ONE</sup>



## Аппарат ONE для идеального ухода

Assistina One — лучший выбор для ухода за стоматологическими наконечниками, воздушными моторами и пневматическими скалерами. Устройство W&H нового поколения с одним разъемом оснащено необычной системой Quick Connect для смены наконечников. Его можно без труда адаптировать к индивидуальным требованиям и легко интегрировать в любой рабочий процесс.



### Съемное поворотное окно

Герметизирует область обслуживания и легко снимается



**Система Quick Connect**  
Гибкая смена наконечников благодаря адаптеру Quick ISO или Quick RM.




### Кнопка запуска одним касанием

Для интуитивно понятного и простого управления

### Краткая продолжительность цикла

Полная смазка и очистка всего за 18 секунд

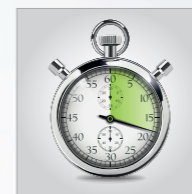


### Готовые к использованию картриджи для заправки

Для быстрой, чистой и несложной дозаправки масла и раствора Activefluid



### HEPA-фильтр

Для соблюдения гигиенических норм и создания чистой рабочей среды

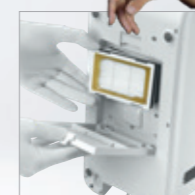

**Гладкая поверхность**  
Для тщательной очистки устройства



## Аппарат ONE включается одним нажатием кнопки

Весь процесс смазки и очистки спреевых каналов занимает всего 18 секунд. Поэтому Assistina One является самым быстрым решением для обслуживания в своем классе. Устройство работает исключительно на сжатом воздухе. Подключение к электросети не требуется. Аппарат Assistina One устанавливается и готов к использованию в кратчайшие сроки. Благодаря кнопке запуска одним нажатием и практичной системе картриджей для заправки масла и чистящей жидкости, он представляет собой современное решение для обслуживания в стоматологических кабинетах и клиниках с высокими требованиями к уходу за наконечниками.



«Аппарат

ONE



поддерживает  
МЕНЯ.»

## Аппарат ONE для тщательного ухода

Качественные наконечники требуют качественного ухода. Фактически, правильный и профессиональный уход играет ключевую роль для долговечности и надежности наконечников. Устройство обеспечивает идеальный уход и правильно выполняет циклы смазки, необходимые для функционирования и длительного срока службы стоматологических наконечников.

### Аппарат ONE для большей эффективности

Благодаря инновационному процессу смазки масляным туманом стоматологические наконечники смазываются быстрее и тщательнее, чем когда-либо прежде. Сначала масло распыляется в адаптере и образует мелкодисперсный масляный туман, который затем под высоким давлением впрыскивается в наконечник. Загрязнения в наконечнике удаляются, и все части привода смазываются без их перемещения. Аэрозоли активно удаляются из камеры, а отработанный воздух очищается с помощью HEPA-фильтра — для безопасной и чистой рабочей среды.

### Аппарат ONE для большей продуктивности

Assistina One обеспечивает тщательное смазывание всех деталей привода, надлежащую очистку спреевых каналов и сушку внутренних деталей привода сжатым воздухом. Очистка спреевых каналов препятствует засорению отложениями известкового налета, и, таким образом, обеспечивает бесперебойную работу, более длительный срок службы и более низкие затраты на обслуживание.

#### Оранжевый:

Тщательная смазка деталей привода

#### Зеленый:

Надлежащая очистка спреевых каналов и сушка внутренних деталей приводов



## Аппарат ONE для большей гибкости

Аппарат Assistina One полностью ориентирован на потребности пользователей в стоматологических кабинетах. Различные адаптеры для высокой гибкости, интуитивно понятный дизайн для удобного использования и отличных результатов обработки: Это решение для обслуживания нового поколения с одним разъемом выводит обработку наконечников, моторов и скалеров на совершенно новый уровень.



## Аппарат ONE для большей скорости

Революционная система Quick Connect от W&H сделала смену простой, как никогда прежде. Просто подключите адаптер Quick ISO или Quick RM — и можно начинать уход за всеми наконечниками с разъемом ISO или стандартным разъемом с 4/6 отверстиями. Благодаря большому выбору адаптеров, Assistina One отвечает требованиям всех типов стоматологических кабинетов и клиник.

**Quick RM** для турбинных наконечников



**Quick ISO** для прямых и угловых наконечников



**Аппарат ONE для большего разнообразия**

Для фирменных разъемов, таких как Roto Quick, просто выберите подходящий адаптер, подключите и запустите! Чтобы ознакомиться с полным ассортиментом адаптеров, отсканируйте QR-код.



## Аппарат ONE облегчает МОИ рабочие процессы

Выберите  
адаптер.



Подсоедините  
прямой наконечник.



Закройте  
поворотное окно.




Нажмите кнопку  
запуска. Программа  
очистки и смазки  
запускается  
автоматически.



Всего через 18 секунд  
очистка и смазка  
завершены, и  
наконечник превосходно  
обработан.



## МАСЛО ONE

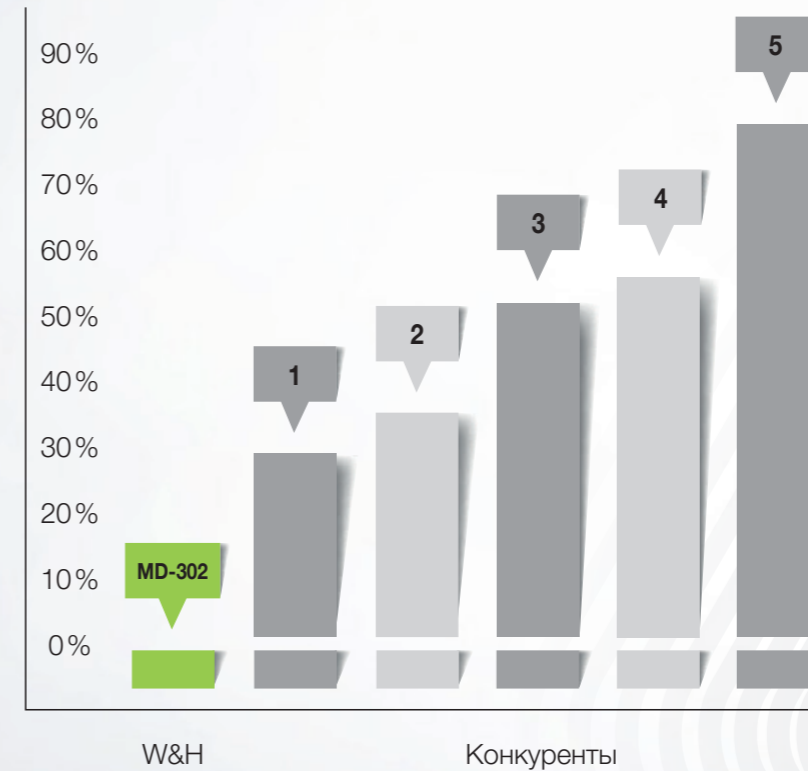

Уход за наконечниками с помощью Assistina One более экономичен, чем уход с помощью других смазочных материалов или систем. Результаты лабораторных испытаний различных масел свидетельствуют о том, что масло MD-302, входящее в состав набора Assistina One Care Set, позволяет существенно снизить коэффициент трения и степень износа деталей привода по сравнению с наиболее часто применяемыми продуктами от компаний-конкурентов.

**Применение данного масла способствует дальнейшему снижению степени износа с 28% до 77%.**

## ONE или 20



=



\* 400 мл в каждом баллоне со спреем.

Набор Assistina Care Set равнозначен 20 баллонам со спреем MD-400\*. Всего одного набора достаточно для обработки более 2800 инструментов, что означает существенную экономию времени и денег, а также снижение количества отходов. Благодаря максимальной смазке и минимальному расходу, Assistina One является чрезвычайно экономичным решением.

#whdentalwerk  
 f @ in ▶  
 video.wh.com

Теперь у вашего  
 торгового агента или  
 на сайте [wh.com](http://wh.com)



«Аппарат

ONE

радует  
 МЕНЯ.»

**Быстро, тщательно, просто**

Assistina One упрощает уход за стоматологическими наконечниками, позволяя выполнять работу быстрее. Благодаря самым коротким циклам в своем классе и отличным результатам, аппарат Assistina One — это лучшее решение для ухода за наконечниками, разработанное для профессиональных стоматологов.




assistina ONE

W&H AIMS  
**Безопасность  
 прежде всего!**



Гигиена приобретает первостепенное значение в стоматологической практике. W&H AIMS поможет Вам в этом с помощью широкого ассортимента продукции, фундаментальных знаний и краткого обзора релевантной информации.

Для безопасности врача и пациента. [aims.wh.com](http://aims.wh.com)

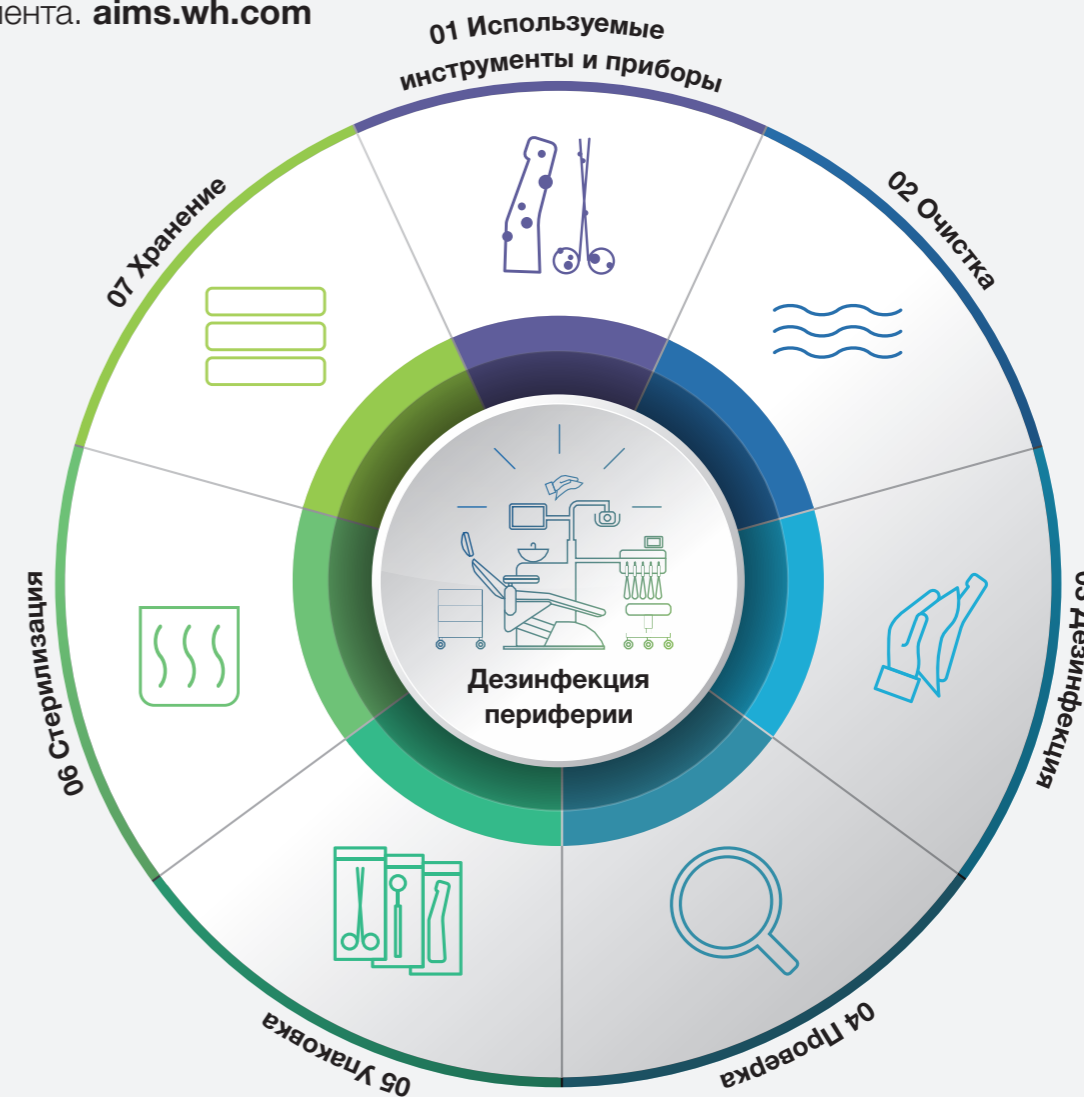

Обеззараживание



Очистка



Дезинфекция



Проверка и уход/  
обслуживание



Упаковка



Стерилизация



Прослеживаемость  
и хранение

# Технические данные

<b>Торговое название:</b> <b>Тип:</b>	<b>Assistina One</b> <b>MB-301</b>
<b>Процесс:</b>	Очистка спреевых каналов, смазка
<b>Назначение</b>	Прямые и угловые наконечники, турбинные наконечники, пневматические скалеры, воздушные моторы
<b>Расход воздуха:</b>	Ок. 50 норм. л/мин
<b>Рабочее давление:</b>	5–10 бар (регулировка с помощью встроенного автоматического регулятора)
<b>Размеры (Ш × Г × В)</b>	166 × 383 × 243 mm
<b>Масса:</b>	2,2 кг
<b>Емкость:</b>	W&H Activefluid (очищающий раствор), 200 мл W&H Service Oil F1, 200 мл




## Набор One Care Set

В набор входит один картридж очищающего раствора, один картридж Service Oil F1 и HEPA-фильтр. Все расходные материалы легко заменяются без использования инструментов.

### Производитель:

**W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH**  
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1  
51111 Bürmoos, **Austria**  
**t** +43 6274 6236-0  
**f** +43 6274 6236-55  
office@wh.com  
**wh.com**

### Авторизованный дилер:



Все изображения приводятся только в качестве иллюстраций.  
Дополнительное оборудование и принадлежности не входят в комплект поставки.

20562 ARU Rev. 000 / 15.05.2025  
С правом на изменения